

MICROPIPETAS MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL

As Micropipetas Kasvi proporcionam mais confiança, reprodutibilidade e precisão na manipulação de líquidos em sua rotina.

Com design versátil combinando ergonomia, praticidade e melhores resultados, as micropipetas apresentam uma exclusiva característica de velocidade tripla turbo para alteração de volume, controlável com apenas uma mão. A trava de volume evita a troca acidental do volume selecionado e o dispensador leve torna a pipetagem mais prática e fácil.

As Micropipetas Monocanal Volume Variável Kasvi são sua melhor opção para procedimentos de transferência de líquidos com características que irão aperfeiçoar seus processos.



Travado



Destravado



Características


- Design: garante a estabilidade das ponteiros;
- Velocidade tripla turbo para troca de volume: característica exclusiva de aceleração proporciona troca de volumes 3 vezes mais rápida que os níveis normais, garantindo agilidade e eficiência durante a troca de volume;
- Botão ejetor com tamanho evoluído: mecanismo de molas minimiza o stress atribuído ao polegar;
- Trava de volume: sistema de trava eficaz, evita dispensação acidental de volumes;
- Visor de fácil visualização: display com três dígitos para exibição de volume e marcação que facilita a leitura;
- Fácil manuseio: dispensação suave e segura com corpo construído em plástico PBT resistente e leve;
- Fácil desmontagem para autoclavagem: cone de ejeção e bocal do cone facilmente removíveis;
- Parcialmente autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.);
- Suporte para micropipetas: acompanha suporte para micropipetas que pode ser fixado na parede;
- Código de cores: sistema de cores padronizado facilita a identificação das micropipetas.

Ejetor com código de cores

Seletor de volume com velocidade tripla turbo

Trava de volume

Display de fácil visualização de volume

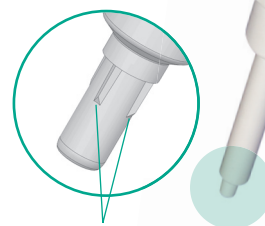

Seu design garante um ajuste estável para a ponteira

Cód. de Cores	Modelo	Volume	Incremento	Imprecisão%	Inexatidão%
Laranja	K1-2A	0,2 - 2 µL	0,001 µL	8,0 - 1,0	± 15,0 - 2,5
Rosa	K1-10A	1 - 10 µL	0,01 µL	2,5 - 0,5	± 5,0 - 1,0
Rosa Claro	K1-20A	2 - 20 µL	0,01 µL	3,0 - 0,5	± 6,0 - 1,0
Verde	K1-100A	10 - 100 µL	0,1 µL	1,0 - 0,3	± 2,0 - 0,8
Amarelo	K1-200A	20 - 200 µL	0,1 µL	1,0 - 0,3	± 2,0 - 0,8
Azul	K1-1000A	100 - 1.000 µL	1 µL	0,6 - 0,3	± 2,0 - 0,8
Roxo	K1-5000A	500 - 5.000 µL	1 µL	0,6 - 0,3	± 2,0 - 0,8

Embalagem contém:

- 01 Micropipeta Monocanal Volume Variável;
- 01 Certificado de Qualidade e Calibração¹;
- 01 Suporte para Micropipeta;
- 01 Manual de Instruções.

¹Micropipeta calibrada pelo fabricante.

ACESSÓRIO

Suporte para cinco micropipetas monocanal ou multicanal.

Modelo	Descrição	Apresentação
K1- STAND	Suporte para 5 Micropipetas	Unidade



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.